





PORADY DOTYCZĄCE URZĄDZANIA IDAL FIRMY


PRZED PODANIEM SZCZEPIONKI

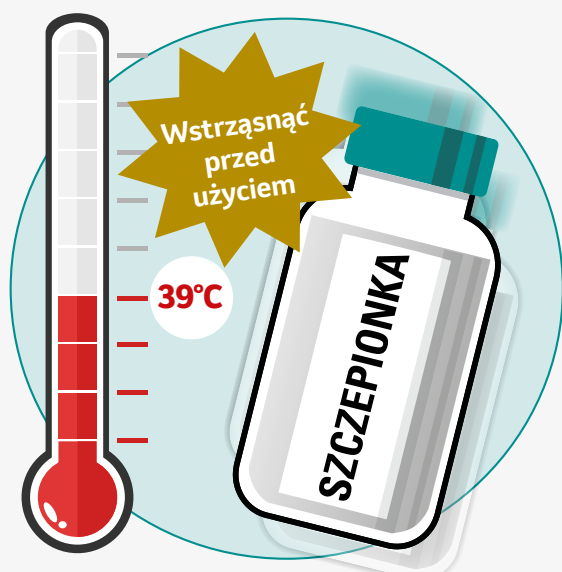

- 1 Podgrzać szczepionkę i ewentualnie roztwór (przez co najmniej 5 minut) w letniej wodzie.

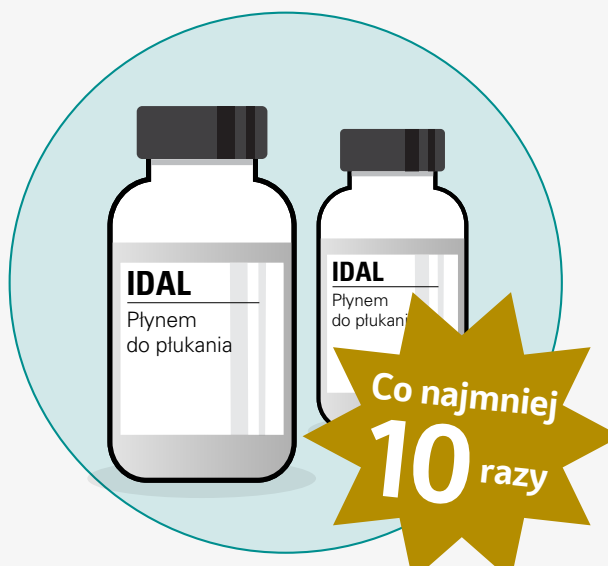

- 2 Przepłukać IDAL co najmniej 10 razy. Regularnie wymieniać fiołki. Można je zamówić bezpłatnie w gabinecie weterynaryjnym.

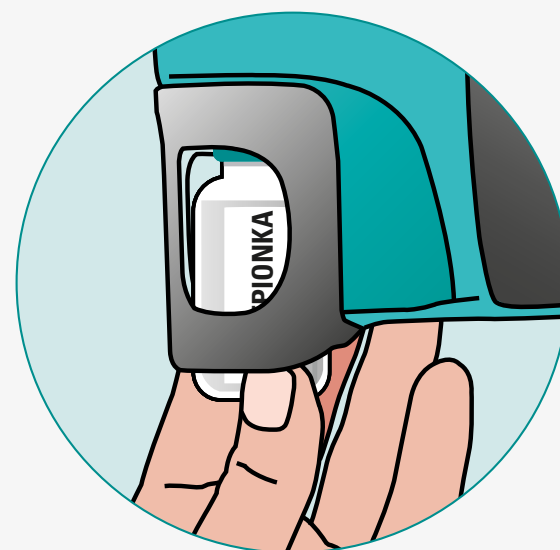


- 3 Umieścić szczepionkę w urządzeniu IDAL. Urządzenie IDAL musi być odwrócone.

W TRAKCIE PODAWANIA SZCZEPIONKI



- 4 Zresetować licznik dzienny na urządzeniu IDAL. Urządzenie IDAL będzie gotowe do użycia.

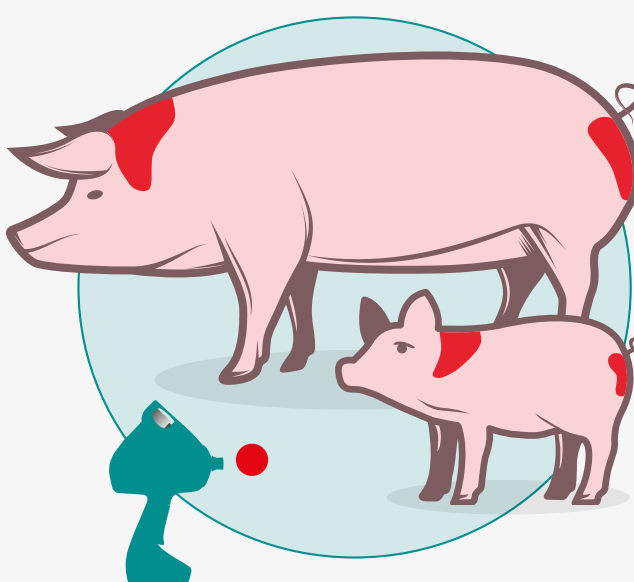


- 5 Podać szczepionkę we właściwym miejscu.




- 6 Podać właściwą ilość szczepionki drogą podskórną. Zapewnić odpowiedni czas kontaktu ze skórą.

PO PODANIU SZCZEPIONKI

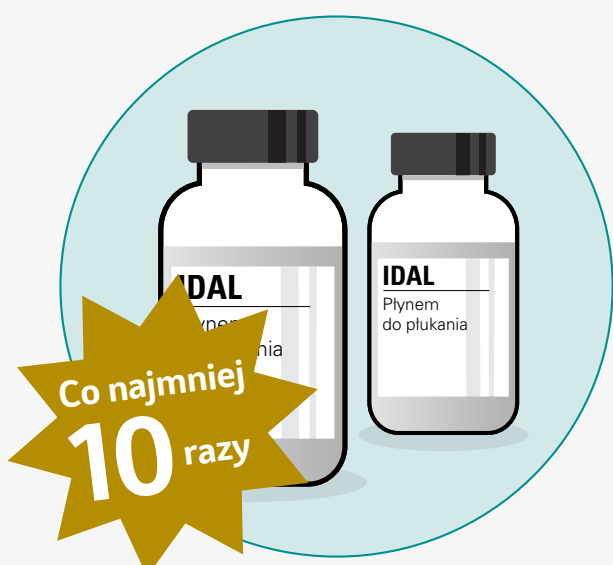

- 7 Po użyciu przepłukać IDAL co najmniej 10 razy. Pozostaw butelkę z płynem do płukania na urządzeniu.

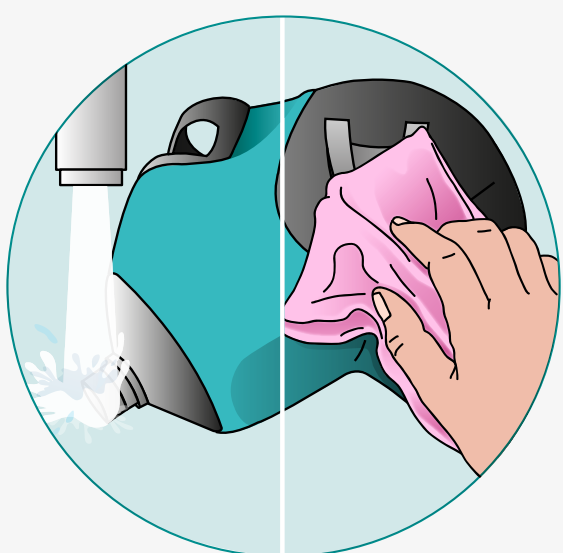

- 8 Oczyszczyć IDAL na zewnątrz. Pod kranem można myć tylko głowicę i nakłuwarkę

Uwaga: obudowa urządzenia IDAL jest odporna wyłącznie na rozpryski wody.



- 9 Wyjąć akumulator z urządzenia IDAL i po oczyszczeniu włożyć do walizki.

✓ Urządzenie IDAL będzie gotowe do ponownego użycia.

ŁADOWANIE BATERII:  MAKSYMALNIE 1,5 GODZ



Zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do platformy użytkowników IDAL.

KWESTIE TECHNICZNE:  +31 485 49 20 00

 **MSD**
Animal Health